

ديما وليث
للخدمات المطبعية

0795667267 - 0799516451

Noor

جامعة البلقاء التطبيقية كلية الهندسة التكنولوجية قسم الهندسة الكيميائية



مختبر هندسة تكرير البترول

اللزوجة المطلقة μ_c
الكثافة ρ

إعداد
المهندس بسام ملكاوي

إصدار القم μ اللزوجة المطلقة
عسل ارتفاع القم



ديما وليث
للخدمات المطبعية

0795667267 - 0799516451

الكثافه ، الكثافه النسبيه (الوزن النوعي) الـ
API
للبنترول الخام وسوائل المنتجات البترولييه بطريقه مقياس

الهيدروميتر

DENSITY , RELATIVE DENSITY (SPECIFIC GRAVITY) OR API

GRAVITY OF CRUDE PETROLEUM AND LIQUID PETROLEUM PRODUCTS BY

HYDROMETER METHOD

ASTMD - 1298

مجال : تستخدم هذه الطريقه في المختبر باستعمال جهاز الهيدروميتر لتحديد
الكثافه النسبيه (الوزن النوعي) أو كثافه الـ
API
لخامات البنترول والمنتجات البترولييه والمخاليط مع الغير بترولييه
وعاده ما تكون سائله وضغطها البخارى ٢٦ رطلًا أو أقل .
وتقاس القيم بهذا الجهاز على الحرارات المناسبه الظاهريه ثم يتم
تعديلها على درجه حرارة ٥٠م والتحويل من الكثافه الى الوزن النوعي
أو كثافه الـ API حسب القوائم القياسيه العالميه .

نطاق العمل :
(١) إن هذه الطريقه تعتبر الانسب لتحديد الكثافه للسوائل الشفافه
والزيوت اللزجه المعتمه باعطاء الوقت الكافى لاستقرار جهاز
الهيدروميتر والحراره واضافه أو انقاص معامل التعديل لميل
السطح للسائل عند مستوى القراءات على الجهاز .
(٢) يمكن اجراء الفحص على درجه حراره مشابهه لحراره الخزانات
الحاويه لكميات الزيوت لتقليل أو تلافي الاخطاء عند حساب
الكميات والحجوم .

ملخص الطريقه :
(١) تحضر العينه عند درجه الحراره الملائمه للفحص ، ثم تصب في
دورق الفحص على نفس درجه الحراره ، ويغمر جهاز الكثافه
في العينه بهدوء في المنتصف وتركه حتى يستقر وتثبت الحراره
ثم تؤخذ قراءه التبديج على جهاز الكثافه مع ملتقى سطح السائل
بتوجيه زاويه النظر الصحيحه والحراره التى عندها أخذت القراءه
(بالامكان وضع الدورق في حمام مائى (سائل) عند الفحص ان كانت
هناك تبدلات للحراره)

معيه : (1) ان التحديد الدقيق للكثافه والكثافه النسبيه (الوزن النوعي) وكثافه الـ (API) للبتروول وفشحاته ضروري لتعديل قياس الحجم عند درجه الحراره ١٥م .

(2) ان الكثافه والكثافه النسبيه (الوزن النوعي) وكثافه الـ API تعتبر معاملأ يدل على نوعيه الزيت الخام ، واسعار البترول عاده ما تقدر علم اساس كثافه الـ (API) بالدرجات من النماحيه المبدئيه كما ويلزم تحديد مواصفات أخرى لاتخاذ القرار بذلك .

تعريف

الكثافه

هي نسبه كتله وحده من السائل الى حجمه عند درجه حراره ١٥م وتسجيل عاده بالكيلوغرام وزناً والحجوم لتراً اخافه لدرجه الحراره ، مثلاً كغم/لتر عند ١٥م .

الكثافه النسبيه (الوزن النوعي)

هي نسبه وزن حجم معين من الماده على درجه حراره معينه الى نسبه وزن حجم معين من الماء على نفس درجه الحراره وتسجيل عاده القراءه متبوعه ب ٦٠/ف٦٠ للوزن البينوعي .

كثافه الـ API

وهي عباره عن معاملات حسابيه وعلاقتها مع الوزن النوعي للماده حيث تعطى النتيجة بالدرجات المواتيه حسب المعادله التاليه

$$API^{\circ} = \frac{141.5}{\text{الوزن النوعي } 60^{\circ} / 60^{\circ}} - 131.5$$

ولا حاجه لتسجيل درجه الحراره لانها معروفه في الوزن النوعي .

القيم الظاهرية

هي القيم التي تقرأ على ميزان الحراره أو جهاز الكثافه اثناء عمليه الفحص وقبل التعديل .

جهاز :

- (١) جهاز الكثافة وهو مصنوع من الزجاج وعليه تدريج حسب نوع الجهاز والمادة التي يستعمل لفحصها وهذا ينطبق مع مواصفات الطرق العالمية (ASTMD) أو (BSI)
- (٢) موازين الحرارة وتعطي قراءات بتدريج في مدى الفحوص عند إجرائها وتنطبق عليها مواصفات الـ (ASTM)
- (٣) دورق جهاز الكثافة وهو إما أن يكون من الزجاج أو البلاستيك الشفاف أو المعدن له شفة تساعد في عمله أنسكب ، يتراوح قطره الداخلي ٢٥ مم أكثر من قطر جهاز الكثافة ويتناسب ارتفاعه مع الجهاز المنمور فيه لقياس الكثافة بارتفاع ٢٥ مم عن قاع الدورق.
- (٤) حمام ثابت من سائل مناسب وليستخدم عندما يتطلب العمل إجراء الفحص لدرجات أقل من درجة حرارة الغرفة (مواد سريعة التغير) أو أعلى من درجة حرارة الغرفة (كالمواد الثقيلة)

درجة حرارة الفحص :

- (١) إن النتيجة المستخلصة من طريقة الفحص بجهاز الكثافة تعتبر أدق ما يكون عند درجة الحرارة ١٥م أو ٦٠ف في حين أنها مناسبة أيضاً عند الحرارة - ١٨م أو ٩٠م وهذا مرده الى نوع وظروف العينة .
- (٢) عندما يراد بارتفاع الكثافة تعديلاً أو حساب الحجم على درجات قياسية ، لذا يجب إجراء الفحص على نفس درجة حرارة العينة في الخزانات ، مع مراعاة التعديل حسب القوائم للمواد الخفيفة المتطابره أثناء الفحص في الخزانات .

الطريقة :

- (١) سخن العينة والدورق لدرجة حرارة متقاربة حيث سيتم الفحص عليها
- (٢) صب العينة في الدورق دون تلويث الجوانب أو إحداث الرغوة أو فقدان المواد المخففة من بعض الزيوت ، ويمكن إزالة فقاعات الرغوة عن السطح باستعمال ورقة ترشيع نظيفة جافة قبل غمر جهاز الكثافة أو ميزان الحرارة ، وحافظ على ثبات درجة الحرارة دون تغيير .
- (٣) يراعى أن يكون الدورق في مكان خالي من التيارات الهوائية ويكون على مستوى مسطح بشكل عمودي شاقولي قليل التبدل في الحرارة .
- (٤) اغمر جهاز الكثافة في العينة واتركه لينزل بسدود دون تلويث العصب للجهاز وابدأ بتقليب العينة بميزان الحرارة حول جهاز الكثافة وعند ثبوت القراءة للحرارة سجلها مع قراءة الجهاز .
- (٥) اضغط بلطف قليلاً على طرف جهاز الكثافة العلوي لينغمز جزئياً تقريباً واتركه ليعود ويستقر في منتصف الدورق ثم خذ القراءة .
- (٦) عند استقرار وثبات القراءات خذ قراءة جهاز الكثافة بتسديد النظر حسب الزاوية الصحيحة على سطح السائل وتلاقي التدريج على جهاز الكثافة .

(٧) في السوائل المعتمه تؤخذ القراءه عند حدود السائل على الجهاز حيث

يحتاج هذا لبعض التصحيح .

(٨) فور أخذ قراءة الجهاز استمر بالتقليب بميزان الحرارة وخذ القراءه

حيث تثبت وسجلها .

الحساب والتقريب :

(١) قم باجراء التعديلات للحراره والكثافه وسجل النتيجة لأقرب

درج للحرارة المعدله .

نقله الوميض ونقله الاشتعال بالطريقة كلفلانز "الاجهاز المفتوح"

FLASH AND FIRE POINTS BY CLEVELAND OPEN CUP

ASTMD - 92

المجال :

- (1) تستخدم هذه الطريقة لتحديد نقطه الوميض ونقله الاشتعال لجميع المنتجات البترولية ما عدا زيوت الحرق التي تفحص بالاجهاز المفتوح ونقله نقطه الوميض لها عن ٧٩ م .
- (2) تقاس النتائج بوحدات الانش لكال رطل و عليه تعامل معاملته المقايسه .

تعريفات :

- (1) نقطه الوميض : هي أقل درجة حراره يتم تعديلها بالمضغط الجوي الباروميترى والتي عندها يحدث لسبب الفحص اشتعالاً في البخار المتجمع اثناء اجراء عمله الفحص .
- (2) نقطه الاشتعال : هي أقل درجة حراره يمكن أن تشتعل فيها العينه تحت الفحص ويستمر الاشتعال لمدة (٥) ثواني .

ملخص الطريقه :

يملأ كأس الفحص بالعينه حتى الاشاره المبينه داخله ثم ترفع الحراره بسرعه عند البدء بالفحص ويتم الإبطاء فيما بعد كلما قربت نقطه الوميض ويتم اجراء التفقيش عن نقطه الوميض في فترات متواليه بامرار الولاعه الخاصه فوق سطح العينه في كأس الفحص وعند حدوث نقطه الوميض تلاحظ ذلك على سطح العينه الملامس لدايره الكأس من الداخل ، وبعدما استمر في التسخين وامرار الولاعه فوق سطح العينه حتى يحدث اشتعال للابخره يستمر لمدة (٥) ث فأكثر .

الاهميه والاستعمال :

- (1) نقطه الوميض تقيس بمقدار ميل العينه لإيجاد مخلوط من الابخره قابل للاشتعال مع الهواء تحت ظروف مخبريه محدده ، وهي احدى أهم المواصفات التي بها يحكم على ماده من حيث قابليتها للالتهاب والاشتعال ومخاطره .
- (2) تنبهر نقطه الوميض في عمليات الشحن ونظم السلامه للتعرف على قابليه الالتهاب والاشتعال للمواد ، ويمكن لماحب الملاقه الاسوداد بالتمريعات لجميع المواد ومواصفاتها .

٣) معرفه نقطه الومبض يمكن الكشف عن احتمال وجود الابخره
باللهب، المواد القابله للاشتعال، بالانفاخه للمواد التي ليس لها
قابلية التبخر أو الاشتعال .

٤) تفيد نقطه الاشتعال في معرفه ميزان العينه من حيث مراقبه
الاحتراق .

الجهاز :

- ١) يتكون جهاز " كليفلاند " المفتوح من كأس الفحص ، سخان
وسيله لهب للفحص ، مسخن وعلاقات تابعه للجهاز وهي
موضحه بالرسم في الطريقه في الكتاب .
- ٢) صندوق مربع واقفي مغلق من ثلاث جهات والاعلى مفتوح ويستخدم
لمنع التيارات الهوائيه من التأثير على الفحص اثناء التشغيل .
- ٣) موازين حراره مناسبه للفحص حسب المواصفات المطلوبه ونمن
المدى من ٤٠٠ م .

محاذير السلامه :

على الفني أخذ جميع الاحتياطات للسلامه اثناء لحظات بدء الفحص
باللهب ، حيث يحتمل وجود مواد متخفذه لنقطه الومبض في العينه
مما يحدث عنه وميضاً ولهباً قوياً عند الفحص الاول باللهب .

أخذ العينه :

- ١) يجب أخذ الاحتياطات التامه عند أخذ العينه لتلافي فقدان
المواد الخفيفه المتطايره ، والتي يمكن أن تسبب في غلط
النتائج عند الفحص ، ولا يجوز فتح أوعيه العينات الا عند
الضروره وبعد التبريد لها (حوالي ١٠ م) أقل من نقطه الومبض
ولا تستعمل العينات التي حصل لها تسريب .
- ٢) لا تحفظ العينات في أوعيه بلاستيكيه لاحتمال اتلاف المواد الخفيفه
لجدران الاوعيه .
- ٣) يحتمل تواجد المواد الهيدروكربونيه الخفيفه مثل البروبان
والبيوتان وهذه لا تظهر عند الفحص لانها تتطاير عند أخذ العينه .
أو عند التركيب على الجهاز ، وهذه خاصه بحدث في المواد
الثقليله والرواسب الزيتيه الناتجه عن تصنيع المذيبات .

تحضير الجهاز :

- ١) بوضع الجهاز على سطح مستوي خالي من الاهتزاز والتبارات
الهوائيه ، وغير معرض للضوء الساطع ليسهل مشاعده الومبض
عند الفحص ، وترفع الحراره قبل نقطه الومبض ب ١٧ م مع مراعاة
المحافظه على الابخره المتجمعه بعدم تكرار التجربه بلا داعي ،
أو توجيه التنفس اليها أو الحركه المؤثره الغير ضروريه .
- ٢) اغسل وعاء الفحص بمذيب لازاله الرواسب العالقه الصمغيه
والمتبقية من الفحص السابق ، ويمكن ذلك بفرشاه معدنيه ناعمه
ويغسل الكأس بالماء ثم يجفف في فرن لعدده دقائق ويبرد لحوالي
٦٠ م أقل من نقطه الومبض .

(٣) بثبت ميزان الحرارة على الحد من بحيث يرتفع مستودعه عن قاع الكأس بمقدار $\frac{1}{2}$ بوصة مع مساعده تبسيط حركه الحارق (معدو اللهب) عند اجراء الفحص بالشعله *

الطريقه

- (١) املا الكأس بالمعينة حتى الاشاره الداخليه مع ازاله فقاعات الهواء
- (٢) أشعل الحارق (البولاعه) وانحط الشعله بنقطه $\frac{1}{4}$ من المبرده
- (٣) ابدأ التسخين بمعدل ١٤م - ١٧م في الدقيقة *
- وقبل نقطه الوميض حوالي ٦٥م اخفض حراره التسخين بحيث يصبح لارتفاع الحراره بمعدل ٥م - ٦م قبل حدوث الوميض ٢٨م *
- (٤) عندها ابدأ بامرار الشعله وتجربه الوميض كما ٢م بحركه هادئه مستمره تصل في مداها لحوالي ٦ بوصات على أن ترتفع عن حافته الكأس ٢م وبسرعه (١) ثانيه وفي اتجاه واحد يكون الفحص *
- (٥) قور حدوث اللهب تسجل درجه الحراره على الميزان المعلق (احذر الوميض الازرق الوممي)
- (٦) للحصول على نقطه الاشتعال استمر في التسخين بمعدل ٦م - ٧م وبالفحص كما درجتين حتى ٢م حتى يحدث الاشتعال ويستمر لمدة ٥ ثواني *

الحساب والتقدير

سجل نقطه الاشتعال ونقطه الوميض وعد لها إن لزم الامر كمائتي الكتاب *

نقطة الوميض بجهاز (بينسكي مارتن) المنغلق

FLASH POINT BY PENSKY MARTENS
CLOSED TESTER ASTM D - 93

المجال :

١. تستخدم هذه الطريقة لتحديد نقطة الوميض بطريقة بينسكي مارتنز بالجهاز المنغلق لزيوت الوقود والتزييت والمحالييل المحتوية مواد صلبة عالقة والسوائل التي تفضل الى طبقات أثناء الفحص .

٢. السوائل التي لها درجة لزوجة ٥٠ سنتي ستوك على درجة حراره ٤٠م لا يحتمل احتوائها على مواد صلبة معلقة وليس لها ميل لتكوين طبقة رقيقه على سطحها فهذه تفحص بطريقة (ASTM - 56) .

تعريف :

١. نقطة الوميض هي اقل درجة حراره معدله على الضغط الجوي والتي عندها يحدث لهب الفحص اشتعالاً في الابخره المتجمعه على سطح السائل في ظروف الفحص .

٢. في بعض الحالات وقرب نقطة الوميض من الحدوث تظهر شعلة زرقاء اللون . فهذه ليست نقطة الوميض ويكون سببها بعض الغازات الخفيفه القليله نسبياً .

٣. يمكن للعينه ان تعطي نقطة وميض مبكره اذا ماتعرضت الابخره المجمعه لشعلة عاليه .

ملخص الطريقة :

١. تسخن العينه ببطئ بمعدل ثابت مع التقليب الاوتوماتيكي أو اليدوي . ثم يوجه لهب صغير على فترات مع ايقاف التقليب . وحيث تحدث نقطة الوميض عند أقل درجة حراره يلتهب فيها الابخره المجمعه فوق سطح العينه عند التعرض له .

الأهمية والاستعمال :

- ٠١ نقطة الوميض تعني ميل العينة لتكوين مزيجاً ملتهباً مع الهواء، تحت ظروف فحص المختبر .
- ٠٢ ونقطة الوميض تعتبر احدى الصفات التي تقرر مدى خطورة وقابلية المواد للاشتعال وعلى اية درجات حراره .
- ٠٣ تستخدم نقطة الوميض باهمية في عمليات الشحن ونظم السلامة حيث تدل على مدى القابلية للالتهاب أو الاشتعال للمواد . لذا يجب على المتعاملين مع تلك المواد بالاطلاع على حدود التعامل بها .
- ٠٤ يمكن لنقطة الوميض ان تكون مؤشراً للمواد سريعة التبخر والقابله للاشتعال وغيرها من المواد الغير قابله . وبذا يمكن الاستدلال بنقطة الوميض المنخفضه للكاز بتلوئه بالجزيين مثلاً .

الجهاز :

- ٠١ جهاز بنسكي مارتز (المنلق للوميض .
- ٠٢ موازين الحراره وتستخدم بثلاثة انواع .
 - ٠١ ميزان يقرأ من ١٠م - ٦٠م (٩٠) .
 - ٠٢ ميزان يقرأ من ١٣٠م - ٣٧٠م (١٠٠) .
 - ٠٣ ميزان يقرأ من ٥م - ١١٠م (١٥٠) .
 - ٠٤ ميزان يقرأ من ٩٠م - ٣٧٠م (١٦٠) .
 - ٠٥ ميزان يقرأ من ٦٠م - ١٤٠م (١٨٠) .

محاذير السلامة :

على المشغل ان يكون ذا دراية كافية بمعرفة المواد وادوات السلامة واستعمالها .

أخذ العينة :

- ٠١ يجب اخذ العينة مع الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب وفقدان المواد الخفيفه . كما لاتفتح أوعية العينات الامد الضرورية للفحص بعد تبريدها حتى ٨م اقل من نقطة الوميض المتوقعه ويجب الغاء العينات التي يحمل فيها تسريب من وعاء العينة .
- ٠٢ يجب ان لاتحفظ العينات في اوعية بلاستيكية خاصة المواد التي لها قابلية التبخر السريع بالنسب العاليه .

تحضير الجهاز :

يوضع الجهاز على سطح مستوى ثابت بعيداً عن الاهتزاز والتيارات الهوائية . ويمكن تلاقي التيارات الهوائية باحاطة الجهاز بصندوق ذو ثلاثة جوانب مفتوحاً من أعلى .

تحضير العينه :

٠١ يمكن تسخين العينات ذات اللزوجة العالية حتى يسهل صيها ولا يحدث هذا الا عند الضرورة بحيث لا تتعدى حرارته ١٧م مثل درجة الوميض .

٠٢ يمكن تجفيف العينات المحتوية على الماء باغافة قليلاً من كلوريد الكالسيوم وخض العينه ثم تركها لتترسب أو بترشيحها

طريقة الفحص :

٠١ الطريقه :

٠١ نظف كأس العينه وجففه مع توابعه قبل البدء في الفحص مع التأكيد على ازالة بقايا المذيبات بعد التنظيف ضع العينه في كأس الفحص حتى المستوى الظاهر داخلها بمؤشر . اغلق الكأس بالغطاء الخاص وضع الجميع في السخان مع ملاحظة اغلاق الغطاء تماماً . ثبت ميزان الحراره في موقعه . برد العينه والجهاز حتى درجة حرارة ١٥م اقل من نقطة الوميض . أشعل وسيلة الفحص باللهب المثبتة فوق الغطاء بحيث يكون قطرهما ٤مم . شغل السخان ليعطي حرارة بمعدل (٥م - ٦) / دقيقة ثم شغل المقلب بسرعة ٩٠ - ١٢٠ دور/دقيقه (ويكون اتجاهه التقلب الى اسفل) .

٠٢ واذا كانت نقطة الوميض معروفه للعينه بأنها ١١٠م . أو اقل استمر في التسخين حتى تقارب نقطة الوميض وقبلها بـ ١٧م أوقف المقلب وابدأ الفحص على فترات كل ارتفاع درجة حرارة واحده مع اعاده التقلب ومتابعة التسخين وعند تجربة الفحص لنقطة الوميض يدخل اللهب لمدة ٥ر . ثانية فقط ويبقى لمدة ١ ثانية ثم يعاد برعه ويتم تشنيل المقلب بعدها حتى تصادف في احدها نقطة الوميض .

٠٣ اذا كانت نقطة الوميض للعينه ١١٠م فأكثر فيجرى العمل كما مر سابقاً ماعدا موعدا البحث عن نقطة الوميض بحيث تصبح كل ٢م درجه .


٠٣ . تسجل النتيجة فور مشاهدة اللهب (الوميض) حيث
تؤخذ درجة الحرارة على الميزان مباشرة (لا تُخْرَج بالليلب الأزرق
الذي يحتمل ظهوره اثناء الفحص فهذه ليست نقطة الوميض .

٠٢ الطريقة ب .

تشبه الطريقة السابقة الذكر ما عدا ابتداء التفتيش عن نقطة
الوميض بحيث تبدأ قبل ١١ م من توقع نقطة الوميض وتؤخذ
القراءات على فترات متتالية كل ١ م - ٥ ر ١ م .

النتيجة والحساب :


يتم تسجيل الحرارة على الميزان فور حدوث الوميض .

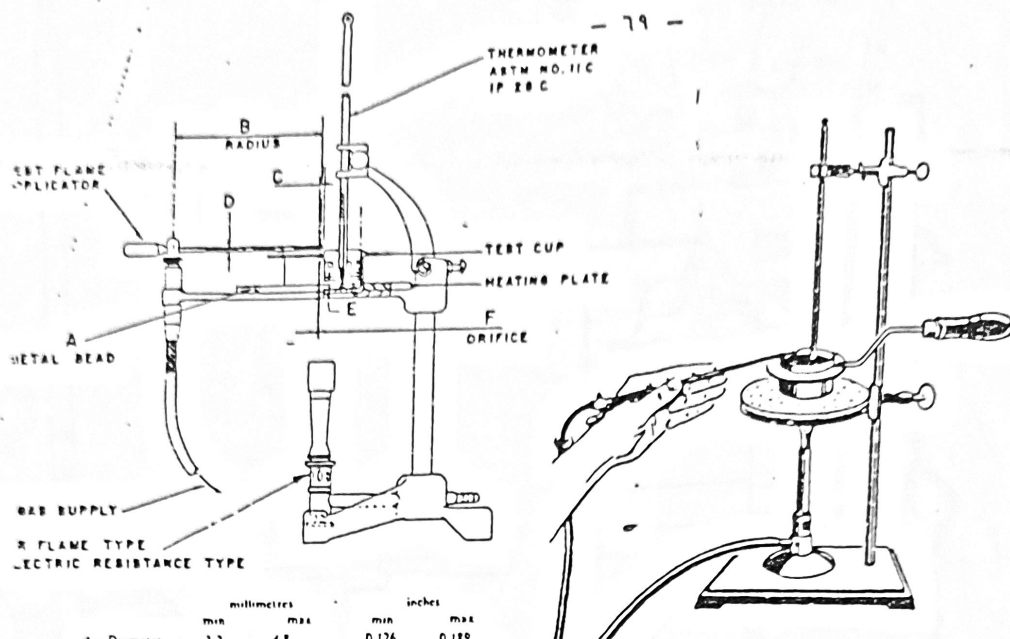

	millimetres		inches	
	min	max	min	max
A—Diameter	3.2	4.8	0.126	0.189
B—Radius	152	nominal	6	nominal
C—Diameter	1.6	nominal	0.063	nominal
D	2		0.078	
E	6	7	0.236	0.276
F—Diameter	0.8	nominal	0.031	nominal


Cleveland open cup flash point test (Courtesy The Asphalt Institute)

Cleveland Open Cup Apparatus

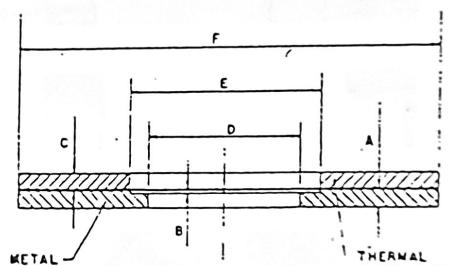


	millimetres		inches	
	min	max	min	max
A	6	7	0.236	0.276
B	0.5	1.0	0.020	0.039
C	6	7	0.236	0.276
D—Diameter	55	56	2.165	2.203
E—Diameter	69.5	70.5	2.736	2.776
F—Diameter	146	159	5.748	6.260

FIG. 2. Heating Plate.

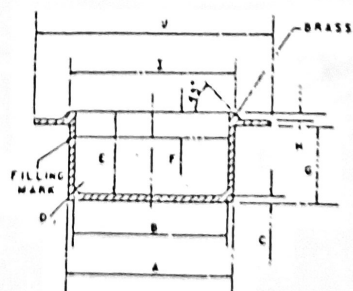


	millimetres		inches	
	min	max	min	max
A	67.5	69	2.658	2.717
B	63	64	2.480	2.520
C	2.8	3.5	0.110	0.138
D—Radius	4	nominal	0.157	nominal
E	32.5	34	1.280	1.339
F	9	10	0.354	0.394
G	31	32.5	1.221	1.280
H	2.8	3.5	0.110	0.138
I	67	70	2.638	2.756
J	77	100	3.031	3.937


Cleveland Open Cup.

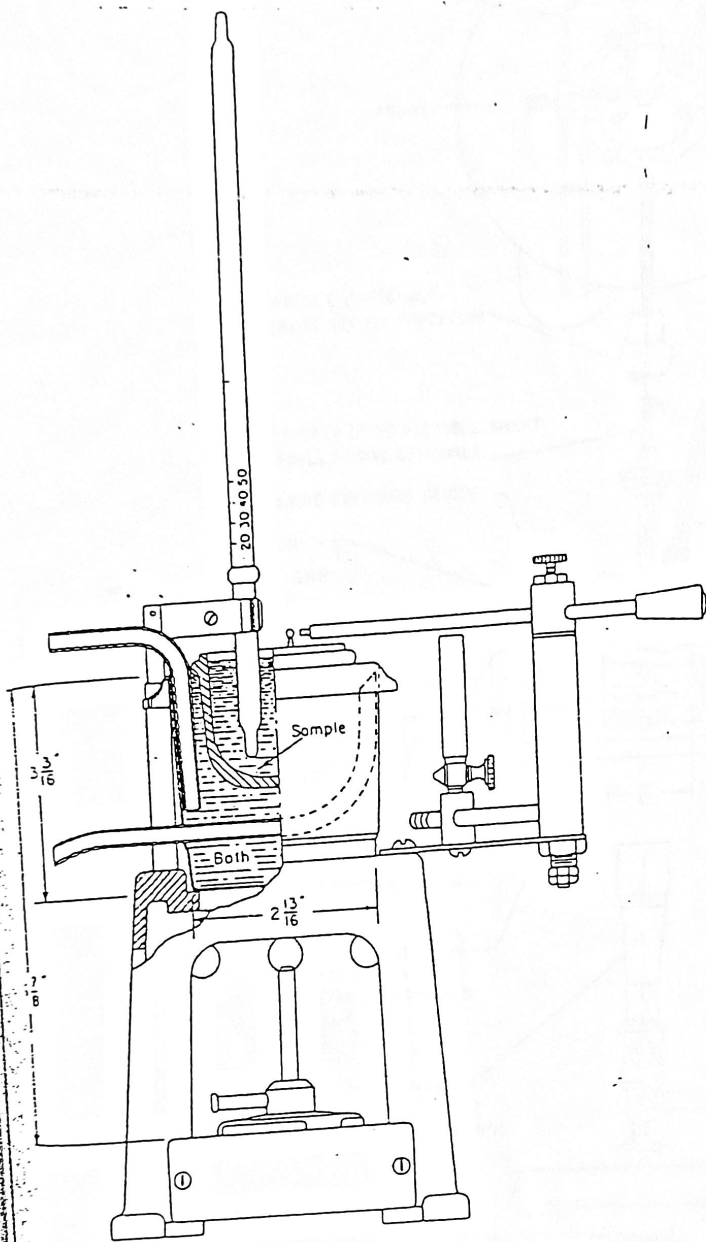


Tag Open-Cup Flash Tester.

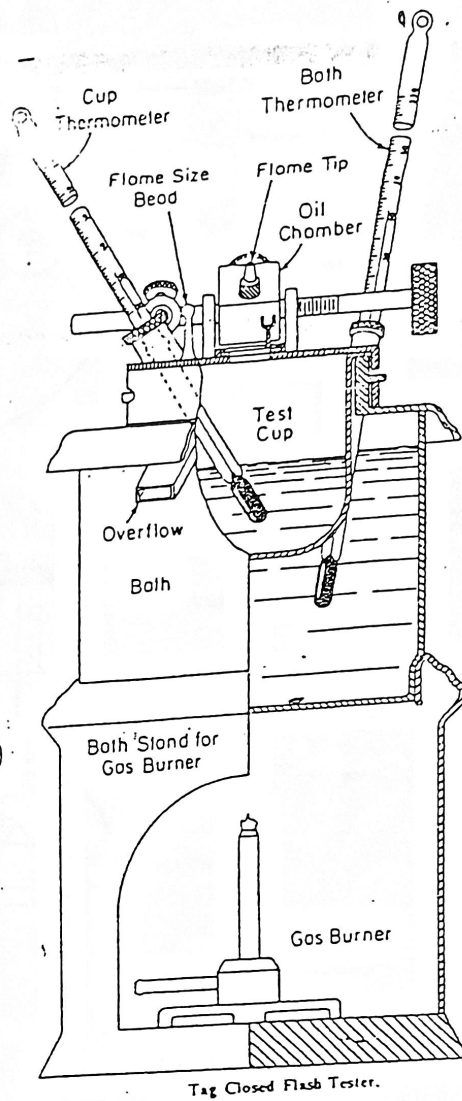


Tag Closed Flash Tester.

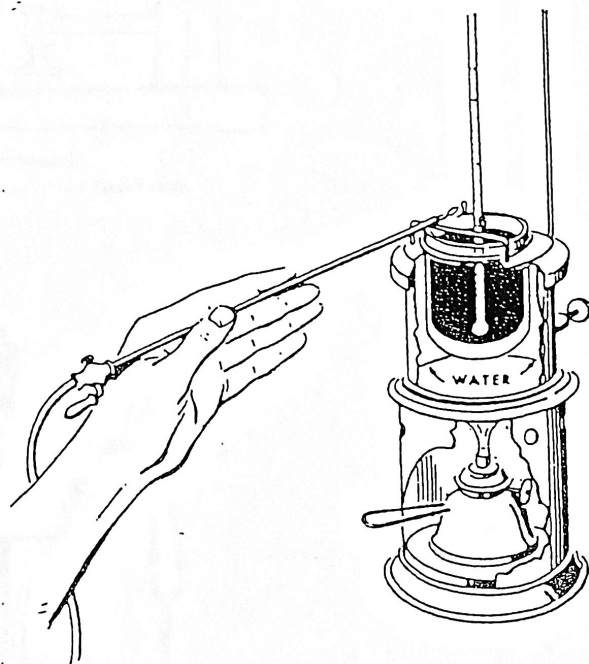

Tag open cup flash point test (Courtesy The Asphalt Insti-

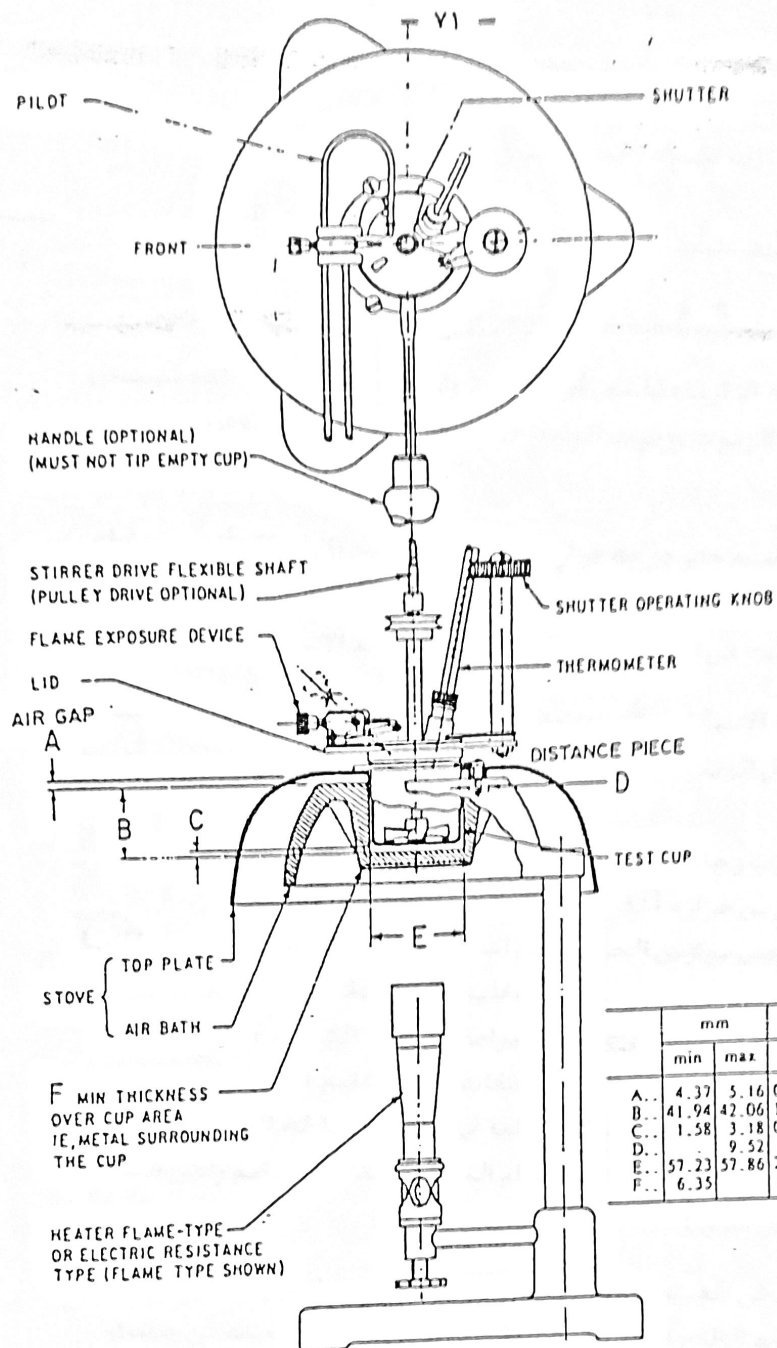

Note: Lid assembly may be positioned either right or left-handed.
Pensky-Martens Closed Flash Tester.

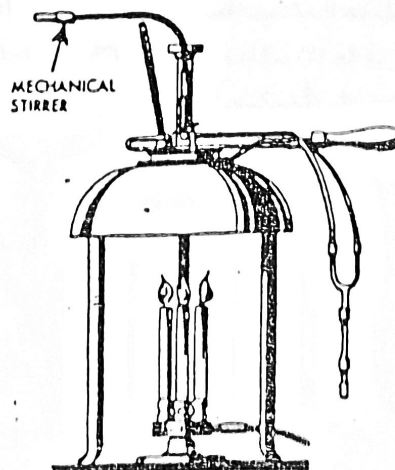

Pensky-Martens flash point test (Courtesy The Asphalt Institute)

نقطة الانسكاب للمواد المتردبة

POUR POINT OF PETROLEUM

OILS - ASTM D - 97

المجال : تصلح هذه الطريقة لفحص أي زيت متروكي ، وتالياً طرق الفحص
لرواسب الزيوت وزيوت الوقود الغير مقطرة والزيوت الثقيلة .

ملخص الطريقة : تبرد العينة حتى درجه حراره ٣م بعد التسخين الاولى للتأكد من نقله
التجمد وعدم الانسكاب وأقل درجه حراره بتوقف . فيها سطح
العينة عن الحركه عند الفحص تعتبر نقطه الانسكاب .

الاعنيه والاستعمال : إن نقطه الانسكاب لأي زيت تعتبر دليلاً لأقل درجه حراره يمكن
استعمال الزيت عندها للغرض المحدد .

الجهاز : (١) انبوب زجاجي (نفس مواصفات انبوب التغميم)
(٢) موازين حراره (نفس موازين الحراره لنقطه التغميم)
(٣) تفحص موازين الحراره قبل استعمالها للتأكد من صحه مواقياتها .
(٤) غطاء فلين (نفس مواصفات فلين نقطه التغميم)
(٥) الغلاف الحامل (كما في كمواصفات نقطه التغميم)
(٦) قاعده الفلين (كما في مواصفات نقطه التغميم)
(٧) طوق الفلين أو المطاط (كما في مواصفات نقطه التغميم)
(٨) حمام التبريد (نفس الحمام المستخدم لنقطه التغميم ولكن التبريد
أقل مدى)

الطريقه : (١) تسخن العينه حتى يسهل سكبها ، ثم دعياً انبوب الفحص حتى
العلامه الظاهره على الانبوب (اذا لم يعرف عن العينه من حيث
التسخين سابقاً فمليك حفظها في حراره الخوqe ٢٤ ساعه قبل الفحص)
أما أن تم تسخين العينه في اليوم السابق لدرجه ٤٥م فتسكب كما مرّ
أولاً في الانبوب وتستمر في الفحص .
(٢) أغلق الانبوب بالفلينه المثبتة فيها ميزان الحراره اغلاقاً تاماً
محكماً وعندما تكون نقطه الانسكاب اكثر من ٣٦م استعمال ميزان الحراره
مرتفع المدى للقراءات على أن يكون طرف مستودع الزئبق العلوي تحت
سطح الزيت ٣ مم بعكس نقطه التغميم .

(٣) تتبع الخطوات التالية عند إجراء نقطة الانسكاب :-

- (١) الزيوت التي لها نقطة انسكاب أكثر من 23°C بسخن الزيت حتى 9°C أعلى من نقطة الانسكاب المتوقعه ثم توضع في الحمام درجه حراره 12°C .
- (٢) الزيوت التي لها نقطة انسكاب أقل من 23°C بسخن الزيت حتى درجه حراره 5°C ثم تبرد حتى درجه حراره 15°C عند ذلك ببدل ميزان الحراره مرتفع المدى بآخر منخفض المدى .
- (٣) تأكد من نظافه وجفاف الجهاز والفلاف وتركيبه سليم ثم يوضع الانبوب في الحمام المعد لإجراء الفحص .
- (٤) بعد أن يبرد الزيت ويندأ بتكوين البلورات الشمعيه الجرافيتيه احذر من اهتزاز الوعاء والعينه أو تحريك ميزان الحراره فسي راحته لأن كسر السطح المتماسك سيؤدي لقراءه نتيجته منخفضه .
- (٥) ابدأ بفحص العينه للكشف على نقطة الانسكاب مبتدئاً من درجه حراره 1°C م وكرر ذلك كل 2°C على التوالي ، بحيث يؤخذ الانبوب من غلافه الحامل في الحمام بشكل عمودي يهدؤ ثم يمسح سطحه بقطنه مبلله بالكحول وتتم امالته جانبياً وملاحظه سطح العينه هل ينسكب أو لا . خلال (٢) ثواني .
- (٦) عند ثبات الحراره وعدم التغبير بنقل الانبوب الى الجانب الاكثر بروده .
- (٧) عند تماسك سطح العينه في الانبوب دون انسكاب لمدته (٥) ثواني وهو في وضع أفقي تماماً ، خذ درجه الحراره وسجلها وهذه نقطه الانسكاب (العليا) إلا اذا سخنت العينه حتى درجه حراره 10.5°C مع التحريك عند التحضير ثم أجرى الفحص عليها والنتيجته تكون نقطه الانسكاب (الدنيا)

خذ النتيجته كما سبق وأخف عليها 2°C ثم سجل النتيجته النها ثبته
لنقطه الانسكاب درجه مئوية .

حساب والتقريب :

نقطة التغير المتتجات المتروايه

CLOUD POINT OF PETROLEUM OILS

ASTM D - 2500

المجال :

تستخدم هذه الطريقة للزيت البتروليه الشفافه وبدرجه
تغير أقل من ٤٩ م .

ملخص الطريقه :

تبرد العينه لدرجه حراره معينه ويتكرر فحصها عند درجه
الحراره التي تبدأ عندها الزيت بتكوين الغش وتسجيل
هذه الحراره على أنها نقطه التغير .

الاعميه :

تعتبر نقطه التغير للزيت البتروليه دليلاً لأقل درجه حراره
يمكن استعمال الزيت فيها للاغراض المخصصه لها دون ظهور
التكوين البلوري للمواد الشمعيه .

الجهاز :

(١) انبوب اختبار زجاجي خاص اسطوانتي الشكل عليه علامه مميزه
لمستوى العينه ، مسطح القاع ٣٠ مم الى ٣٥ مم قطره
الداخلي ١١٥ مم الى ١٢٥ مم ارتفاعه وعلامه تحديد مستوى
الزيت داخله عند ارتفاع ٥٤ مم عن القاع .

(٢) موازين حراره ذات مدى من التد اربع بناسب قيم نقاط التغير
المنخفضه والمرتفعه .

(٣) فلين بقطر بناسب انبوب الاختبار مع وجود ثقب في المركز
بناسب قطر ميزان الحراره لتثبيتته .

(٤) غلاف معدني أو زجاجي لا يسرب الماء اسطوانتي مسطح القاع
ارتفاعه ١١٥ مم وقطره الداخلي ٤٢ مم مثبت عمودياً بشكل
لا يسمح بالاهتز از في همام التبريد يرتفع طرفه العلوي عن
السطح لوسيله التبريد بمقدار ٢٥ مم .

(٥) قاعده من الفلين سماكه ٦ مم لتدخل بسهولة في الغلاف المعدني .

(٦) طوق من الفلين أو الفايبر أو المطاط بلبس تماماً حول الوعاء
الزجاجي المفحص من الخارج ويسهل مروره داخل الغلاف المعدني
والغرض منها منع التلامس بين انبوب الفحص والغلاف المعدني
للمبرد .

محاذاة السلامه من حيث سوائل التبريد كالاستون أو الكحول أو
النافثا وعلى ذات قابليه اشتعال .

الطريقه :

- (١) اضبط حراره العينه المبعده للفحص حتى درجه حراره ١٤م
فوق درجه التغميم بعد التأكد من عدم وجود الماء بالترشيع عند
نفس درجه انحراره ١٤م .
- (٢) توضع العينه في وعاء الفحص حتى العلامه المحدده
- (٣) اغلق الانبوب جيداً بالفلينه حامله ميزان الحراره ويستعمل
المدى العالي عندما تكون نقطه التغميم اكثر من ٢٨م والسدى
المنخفض عندما تكون درجه التغميم أقل من ٢٨م وعند التركيب
بضبط موقع ميزان الحراره عمودياً ومستودعه ملامساً لقاع
الانبوب الزجاجي مع احكام اغلاق الفلينه .
- (٤) تأكد من نظافه وجفاف انبوب الاختبار حافظ العينه ولا يوضع
مباشرة في الوسط البارد المقارب لتنطيه التغميم .
- (٥) يتم ضبط الحراره حتى تثبت عند ٢م الى ٢٠م .
- (٦) يتكرر الفحص والمشاعده كل دقيقه بحيث يرفع الانبوب من
حمام التبريد دون تعريضه للاهتزاز أو الخلط وبعد المشاعده
بعاد قوياً خلال (٣) ثواني اذا لم يظهر الغباش في الزيت حتى
درجه حراره ١٠م انقل الانبوب الى الموقع الاكثر تبريداً في
الحمام - ١٨م وانتظر بالفحص حتى - ٧م .
- (٧) عند ملاحظه بدء التغميم في قاع الانبوب وتشكيل الغباش
تسجل درجه الحراره على الميزان قوياً وتكون هذه نقطه التغميم *

* تجربة الاختراق القياسية *

تجربة الغرز

Penetration Test

ASTM : (D5 - 73)

AASHO :

مقدمة :- هذه التجربة مستخدمة لمعرفة مدى ليونة عينة من الاسفلت المستعمل وذلك لبيان الاختراق الحادث في المواد البيتومينية الملمبة والشبة ملمبة .
(Solid or semi - solid) والتي لها قيمة اختراق اقل من ٣٥٠ ليعطينا فكرة عن قدرة الاسفلت على المحافظة على الليونة "Plastisity" هذا يعني ان المواد البيتومينية لها قيمة اختراق اقل من ٣٥٠ يمكن اختبارها بواسطة جهاز الاختراق القياسي (الغرز) .

اما المواد البيتومينية التي لها قيمة اختراق تتراوح ما بين (٣٥٠ - ٥٠٠) فيمكن اختبارها بواسطة اجهزة خاصة معدلة .

النظرية التي بنيت عليها التجربة :-

يمكن تعريف الاختراق او الغرز على انه : القوام (الملمبة النسيجية درجة التماسك) للمادة البيتومينية معبرا عنه بالمسافة ب $\frac{1}{16}$ الملليمترات التي يمكن ان تخترقها ابرة الاختراق القياسية راسيا في العينة المراد اختبارها تحت ظروف قياسية ومعروفة من التحميل والوقت ودرجة الحرارة .

وتتراوح درجة التماسك للمواد الاسفلتية ما بين السائل الذي هو انشيف قليلا من الماء الى ما هو جامد - او شبه صلب ويسبب هذا التباين طريقة مثالية تفيد بقياس درجة التماسك .

تجربة الاختراق القياسية (الغرز) واحدة من اشهر التجارب الوضعية العملية المفيدة وهي تستعمل بكثرة في المواصفات العامة والشروط الخاصة للطرق ويمكن اجراؤها في المعمل او الموقع .

وتستخدم هذه التجربة لقياس القوام لعينات الاسفلت وكمؤشر لاجراء المقارنة بين العديد من عينات المواد البيتومينية المختلفة الخواص .

الاجهزة المستعملة في اجراء الاختبار :-

١ - جهاز الاختراق Penetration Apparatus ويتكون من ساعة لقياس الاختراق ووحدة الاختراق تقرأ ب $\frac{1}{16}$ من الملم على لوحة مدرجة . وحامل تثبيت ابرة الابرة ويصح له بالانزلاق بدون احتكاك وقاعدة لها فقاعة تسمية لضبط الجهاز .

٢ - ابرة الاختراق القياسية Penetration Needle : وتكون مصنوعة من الاستينل ستيل وتكون ايضا منتظمة القطر من اعلى ومدنية من الاسفل وقطرها يتراوح

(١٠٠ و ١٠٢) سم وطولها حوالي ٥٠ سم .

- ٣ - اناء لوضع العينة المراد اختبارها Sample container
- ٤ - حمام مائي Water Bath
- ٥ - ساعة لقياس الزمن Timing Device " stop watch "
- ٦ - ترمومترات (ميزان حرارة) Thermometers
- ٧ - اناء نقل Transfer Dish

تجهيز العينة للاختبار :-

أ - سخن العينة المراد اختبارها بعناية حتى تصبح سائلة ليحمل صبيها بحيث لا تزيد درجة حرارة التسخين عن ٩٠°م فوق نقطة اللبونة للقطران او فوق ٩٠°م بالنسبة للأسفلت (المستومين) ويجب ان لا يزيد وقت تسخين العينة عن ٣٠ دقيقة .

ب - امكب العينة في الوعاء المختص للاختبار بحيث لا يقل عمق العينة داخل الوعاء عن ٣٠ سم فوق منسوب قاع الاناء وحيث يكون سطح العينة افقيا تماما .

ج - غطي العينة بمادة دهنية خفيا من تراكم الأتربة فوقها واتركها لتبرد لدرجة حرارة من (١٥ - ٣٠)°م في حوالي فترة زمنية من (١ - ٢) ساعة ثم ضع العينة في الحمام المائي حتى تحمل على درجة حرارة التجربة (٢٥°م . ٧٧°ف) .

شروط اجراء الاختبار :-

- | | |
|---|---------------|
| درجة حرارة عينة الاسفلت المراد اختبارها | ٧٧°ف (٢٥°م) |
| زمن (مدة) التحميل تستمر | ٥ ثواني |
| الوزن القياسي المؤثر على العينة | ١٠٠ جرام |

خطوات اجراء الاختبار :-

١ - ضع الاسبرة القياسية بعد تنظيفها جيدا في فك الجهاز وحمل القياسي الرئيسي الحامل لاسبرة الاختراق القياسية بحمل منتظم التوزيع قدره (٥٠ جم) وبذلك يصبح الحمل الكلي المؤثر على العينة قدره (١٠٠ جم) وبموجب متفاوت قدره ٥ او ١٠ جم .

٢ - ضع الاناء الذي به العينة في الحمام المائي حتى يغطي الماء تماما وتحمل على درجة الحرارة المطلوبة لاجراء الاختبار ثم انقل الاناء الحاملي للعينة من الحمام المائي الى مكان وضعها على جهاز الاختراق .

٣ - اجعل الاسبرة القياسية تلامس سطح العينة وسجل القراءة الاولى للمؤثر ثم امح لها بالاختراق خلال العينة لمدة ٥ ثواني وسجل القراءة الثانية

- ٤٠ -

- الفرق بين القراءات ، ثم يعطينا قيمة الاختراق الحادث بالعيننة .
- ٤ - كرر الخطوات السابقة على عينتين أخريتين من نفس نوع الاسفلت مع ملاحظة تنظيف الاسرة بعد كل عملية غرز لكي تبقى الاسرة نظيفة وتنزل في عيننة الاسفلت بسهولة .
- ٥ - قيمة الاختراق للعيننة :- هي القيمة المتوسطة للثلاثة تحارب التي اجريت على نفس نوع العيننة .
- ملحوظة :-

- أ - اذا وجد ان هناك قيمة عشوائية قد تم الحصول عليها في احدى التجارب - فيجب اعادة هذه التجربة وذلك حتى تكون القيمة المتوسطة سليمة .
- ب - عند التحويل من الدرجات (فهرنهايت) الى الدرجات المئوية يكون كالتالي :-

$$٢٥^{\circ} \text{ م} = ٥/٩ \times (٢٢ - ٧٧)$$

في حالة العكس

$$٢٢ = ٢٧ + ٩/٥ \times ٢٥$$

- ج - كلما زادت مسافة الاختراق دل ذلك على ليونة العيننة
- د - أماكن الغرز يجب ان تكون متباعدة عن بعضها بما لا يقل عن ١ سم وتعيده عن جدار الاناء .

$$F = 32 + \frac{9}{5} [C^{\circ}]$$

$$= 32 + 1.8 C^{\circ}$$

$$C^{\circ} = \frac{F - 32}{1.8}$$


النتائج :

رقم التجربة	١	٢	٣
القراءة الاولى	٣٥	٥٠	٩٠
القراءة الثانية	١٢٧	١٤٠	١٧٨
قيمة الاحتراق الحادث "فرق القرائتين"	٩٢	٩٠	٨٨



من هذه النتائج يمكن توصيف العينة على انها عينة من الامفلت الجامد ملبة القوام ذو قيمة احتراق هي متوسط انتاج الثلاث تجارب التي تم اجراءها .

$$90 = \frac{88 + 90 + 92}{3}$$


عينة ملبة القوام ذو قيمة احتراق ما بين (٨٥ - ١٠٠)

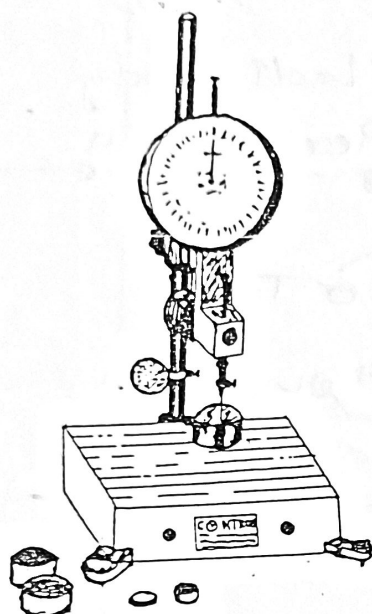

- 15 -

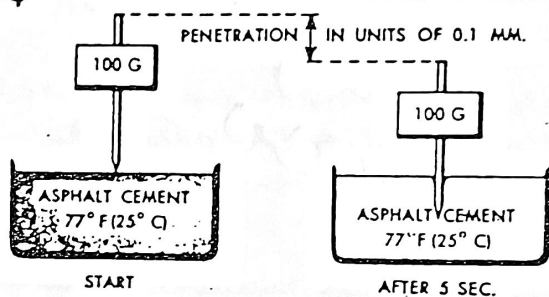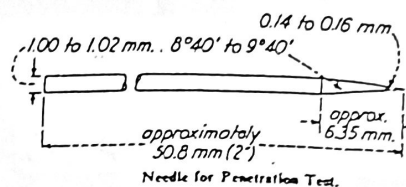

Standard penetration test (Courtesy The Asphalt Institute)

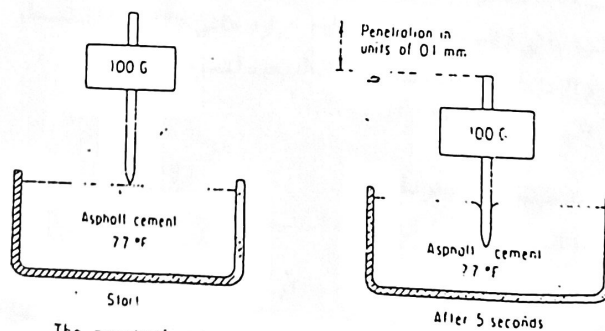

The penetration test for determining the relative hardness or consistency of asphalt cement.

(775° - 780C)

الرماد في المنتجات البترولية

ASH FROM PETROLEUM PRODUCTS

ASTMD - 482

تستخدم هذه الطريقة لتحديد كمية الرماد في المقطرات والرواسب البترولية وزيت التوربينات وزيت الخام وزيت التزييت والشميات والمنتجات البترولية الاخرى ، وحشما وجد الرماد فانه يعتبر شوائب غير مرغوب فيها (سيما أن الرماد معدني الاصل) وليس شائبا مؤقتا ، وهذه الطريقة لا تناسب زيوت التزييت المصفاة اليها محسنات .

المجال :

توضع العينة في وعاء الحرق الخاص (جفنه) وتسخن حتى تبدأ بالاحتراق ويستمر الاشتعال حتى يتبقى الرماد والكربون ثم يقضى على المركب الكربوني بتسخين الجفنه في فرن لافح درجه حراره ٧٧٥م ثم تبرد وتوزن وتحسب النتجه وزنا مثويا .

ملخص الطريقة :

إن معرفه كميته الرماد المتبقية من العينة بعد الحرق لأي ماده تدعى معلومات حول امكانيه استعمال ومدى مناسيه ماده الظروف الاستعمال المقرره ، ويمكن أن ينتج الرماد من الزيت أو مركبات معدنيه تذوب في الماء أو مواد مليه دخيله مثل المدأ .

الأمسيه :

(١) صحن تبخير أو جفنه مصنوعه من البلاتين أو السيليكا أو البورسلين سعه ٩٠ - ١٢٠ مللتر .
(٢) فرن كهربائي لافح قادراً على اعطاء حراره خطى ٧٧٥م وبفهم منه النوع المزود بمنافذ للتهويه الطبيعيه لتسريب ناتج حرق الكربون الى حيث يمر الهواء .

الجهاز :

ASTMD-4057

(١) تؤخذ العينه حسب لربه

أخذ العينه

وقبل عينه الفحص يتم خلط العينه الكليه جيداً حتى تتماثل .

(١) سخن الجفنه حتى درجه حراره ٧٧٥م - ٨٠٠م لمدة عشره دقائق أو أكثر ثم بردها في مجفف فارغ (لدرجه حراره الغرفه) ثم أوزنها لاقرّب ٠١ ملغرام .


الطريقه :

(٢) يعتمد مقدار وزن العينة على مقدار المحتوى من الرماد ، ثم
 اوزن في الجفنه مقداراً من العينة يعطي حوالي ٢٠ مللغرام . وعند
 معرفه الوزن اللازم يمكن الحرق في الجفنه لعدده مرات ان كانت
 لا تتسع لمره واحده ، وعند الحرق تسخن العينه في الجفنه حتى
 تقارب نقطه الاشتعال ، عندها يمكن تعريض سطح العينه بما عليه
 من أبقره لشعله النار حيث يبدأ الاشتعال التدريجي ولاستمراره
 ويضبطه بزياده التسخين أو تخفيضه حتى ينتهي الاشتعال ويبقى الرماد
 والكربون .

(٣) تؤخذ الجفنه وتوضع في فرن لافح حرارته ٧٧٥م لمدته تكفي لحرق
 الكربون الموجود في الجفنه ، ثم تؤخذ وتوضع في مجفف حتى
 تبرد وتوزن وتكرر العملية حتى يثبت الوزن (حاذر من وجود الماء
 في العينه عند الفحص ، اليس النظارات الواقيه والعمل تحت صاحب
 الغازات (هود))

الحساب : احسب مقدار الرماد وزناً مثوباً كما يلي :-

$$\text{مقدار الرماد \% وزناً} = \frac{\text{وزن الرماد}}{\text{وزن العينه}} \times 100$$

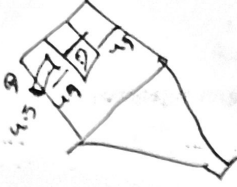

قابلية فصل الماء من الزيوت البترولية والسوائل الصناعية

WATER SEPARABILITY OF PETROLEUM OILS AND SYNTHETIC
FLUIDS ASTM - 1401

- المجال :
- ملخص الطريقة :
- الاجهه والاستعمال :
- الجهاز :
- (١) تستخدم هذه الطريقة لتحديد مدى امكانيه فصل الماء عن الزيوت البترولية والسوائل الصناعية .
يتم خلط ٤٠ مللتر من العينه مع ٤٠ مللتر من الماء المقطر وتسخن لمدة ٥ دقائق بدرجة حراره ٤٠م . في دورق مدرج ثم يوقف التسخين ويتم تسجيل الوقت اللازم لعملية فصل الزيت عن الماء (حيث يكون مستحلب) فاذا لم يتم الفصل خلال ساعه بسجل حجم الزيت المفصول والماء والمستحلب الباقي كل على حده .
 - (٢) تعطي طريقة الفحص هذه مدلولاً على مميزات فصل الماء عن الزيت حيث يعتبر الماء شائباً مزعجاً .
 - (٣) مدرج زجاجي سعة ١٠٠ مللتر وتظهر عليه اجزاء مقسمه من ٥ الى ١٠٠ مللتر كل جز ١ مللتر ، مقاوم للحراره والمواد الكيماويه ، القطر الداخلي لا يقل عن ٢٢٥ مم الى ٢٦٠ مم ولا تزيد نسبة الخطأ في التدرج عن ١ مللتر عند أي نقطه عليه .
حمام تسخين يتسع للمدرج وغمرهما حتى ٨٥ مللتر من مستوى التداويج ويتم ضبط الحراره حتى ٥٤ م ومزوداً بحاملات لتعليق وتثبيت المدرجات بشكل عمودي مركزي يسهل معه الخلط لتكوين المستحلب .
مروحه الخلاط ممنوعه من الكروم المطلي أو الحديد الذي لا يصدأ ، مثبتة على عمود يتصل مع محرك يدور بمعدل ١٥٠٠ دوره في الدقيقة .
وعندما يتم تركيب المدرج على الحمام ووضع الخلاط فيه بارتفاع ٦ مم عن قاع المدرج ، يتم تشغيل الخلاط في المركز تماماً للمدرج وعدم السماح بتردده اكثر من ١ مم عن المركز وعند اتمام تكون المستحلب بعد الخلط يرفع الخلاط عمودياً ويبقى على مستوى المدرج لتنزل نقاط المستحلب العالقه في المدرج .

م. س. عمل

الكيمويات

(١) :

تستخدم مواد كيميائية ذات نقاوة عالية تطابق نقاوة المواد المستخدمة في التحاليل حسب توصيف الجمعية الأميركية لها
(٢) يستخدم الماء المقطر المنظف، تُفقد المواصفات للتحاليل الكيميائية .

(٣)

المذيبات للتنظيف تستعمل المواد الهيدروكربونية الخفيفة مثل النافثا أو النتسان وهي جميعاً قابلة للاشتعال السريع ويجب الحذر عند استعمالها .

أخذ العينه

:

إن هذا الفحص شديد التأثير بأي تلوث لذا يجب أخذ العينه حسب طريقه (4057 - ASTM)

تحضير الجهاز

(١) :

ينظف المدرج بمذيب مناسب لازالة الطبقة الزيتية العالقه ويتبع ذلك الاستنثار ثم ماء الشرب والمياه الساخنه ثم بالماء المقطر .

(٢)

تنظف مروحه الخلط والعمود الحامل لها بالقطن المبلل بالمذيب ويجفف بالهواء (مع مراعاة عدم ثنى العمود اثناء عملية التنظيف) .

الطريقه

(١) :

سخن الحمام حتى درجه حراره ٤٠م بحيث تكون ثابتة ، ثم اضع ٤٠ ملتر من الماء المقطر الى المدرج وبعد ٤٠ ملتر من العينه بحيث يكون المجموع ٨٠ ملتر تماماً عند الاشاره على المدرج ، ثم ضع المدرج بما فيه في الحمام وثبته لغتره حتى تتوازن درجه الحراره حوالي ١٠ دقائق تحت موقع الخلط .

(٢)

اغمر الخلط في العينه حتى يصل العمق المحدد ، ابداء عملية التقليب والخلط بسرعه ١٥٠٠ دوره/دقيقه لمدة ٥ دقائق أو وقف الخلط وأرفعه لمستوى أعلى من سطح العينه في المدرج فاسحاً المجال للنقاط لتعود الى العينه ، ارفع المدرج وانقله الى حمام آخر حراره الغرفه ، خذ قراءه كل ٥ دقائق لحجوم الطبقات المتكونه لكل من الزيت والماء والمحتلب بعد بدء عملية الفصل .

التقرير

(١) :

سجل القراءات كل ٥ دقائق حتى يتم فصل الزيت عن الماء تماماً ويمكن أن يصل ذلك الى ٣٠ دقيقه على درجه حراره ٤٠م ثم عند ٦٠ دقيقه على ٨٥م وأعلى حجم يمكن تسجيله لظهور واتمام طبقه الزيت هو ٤٣ ملتر .

(٢)

يمكن الرجوع للملاحظات في الطريقه لمعرفة وتمييز كل طبقه .

م. سامر علي كاسر

الماء والراسب في مقطرات الوقود بطريقه الطرد المركزي

WATER AND SEDIMENT IN DISTILLATES BY CENTRIFUGE

ASTMD - 2709

- جاء : تستخدم هذه الطريقه لتحديد الماء المتحور والراسب في وقود الديزل ومقطرات المحروقات الاخرى ، ونتائج التحاليل لا يؤخذ بها لحساب الكميات .
- خص الطريقه : (1) تتم عمليه الطرد المركزي لحجم ١٠٠ مللتر من العينه على درجه حراره ٢١م - ٣٢م في انبوب اختبار خاص مدرج باجزاء تصل الي ٠.٠٥٪ .
- هميه والاستعمال : (1) تستخدم الطريقه لمعرفة إن كان الماء أو الراسب موجود أم لا في وقود المقطرات . (2) إن وجود الماء والراسب في زيت الوقود يكون تسبباً في اغلاق الخطوط ومثارة لمشاكل نظم الحراقات ، فتتجمع الراسب في خزانات الاستيداع والمرشحات ، مما يستتج عنه توقف الانسباب الحر للزيت من الخزان الى موقع الحرق ، والماء في مقطرات الوقود بسبب التآكل للخزانات والسعدات ويتواجد ه يعمل على تكوين المستحلبات .
- الجهاز : (1) طارد مركزي قادر على حمل عينتين أو أكثر والدوران بشكل متزن وسرعه تصل الي ٥٠٠ - ٨٠٠ دوره / الدقيقه أو أكثر ، والتي منها يمكن تقدير نسبه قوه الطرد المركزي عند طرف الانبوب ، والحامل الدوار والحلقات المثبته والاعويه والدعامات يجب أن لا تحدث صوتاً أو اختلالاً في التوازن عند التشغيل ، كما ويجب أن يكون الجهاز مزوداً بغطاء متين محكم ليمنع التناثر أو الخطر عند حصول كسر احدى أوعيه العينات .
- والمعادله التاليه تبين العلاقه للدوران والطرد المركزي :
دوره في الدقيقه = $\sqrt{260 \times \frac{\text{القوه النسبيه للطرد المركزي}}{\text{القطر بين الجراف الانابيب}}}$

جهاز انجلىر لفحم اللزوجة

THE ENGLER SPECIFIC VISCOSITY


ASTM D 940 D 1665

AASPH T54


BS 4603

هذا الجهاز يستعمل لمعرفة لزوجة القطران السائل وكذلك لانواع القطران الاخرى ان هذا الجهاز عبارة عن اسطوانة قليلة العمق قطرها (١ انش (٢٥.٤ مم) وله فتحة قطرها ١١.٥ من الانش. (٢٩٨ مم) وطولها ٥٨.٥ انش (٢٠٣٢ مم) ان تعيين الجهاز بدرجة حرارة ٢٥°م بعلته ب ٥٠ سم^٢ من الماء وقياس الزمن الذى يحتاجه الى النزول تحت تأثير الجاذبية الارضية .


ان اللزوجة بمقياس انجلىر عدد ليسرله وحدات لانه يمثل النسبة بين الزمن الذى تحتاجه المادة الاسفلتية بدرجة حرارة معينة الى الزمن الذى تحتاجه نفس الكمية من الماء بدرجة ٢٥°م للمرور من فتحة الجهاز تحت تأثير الجاذبية الارضية .

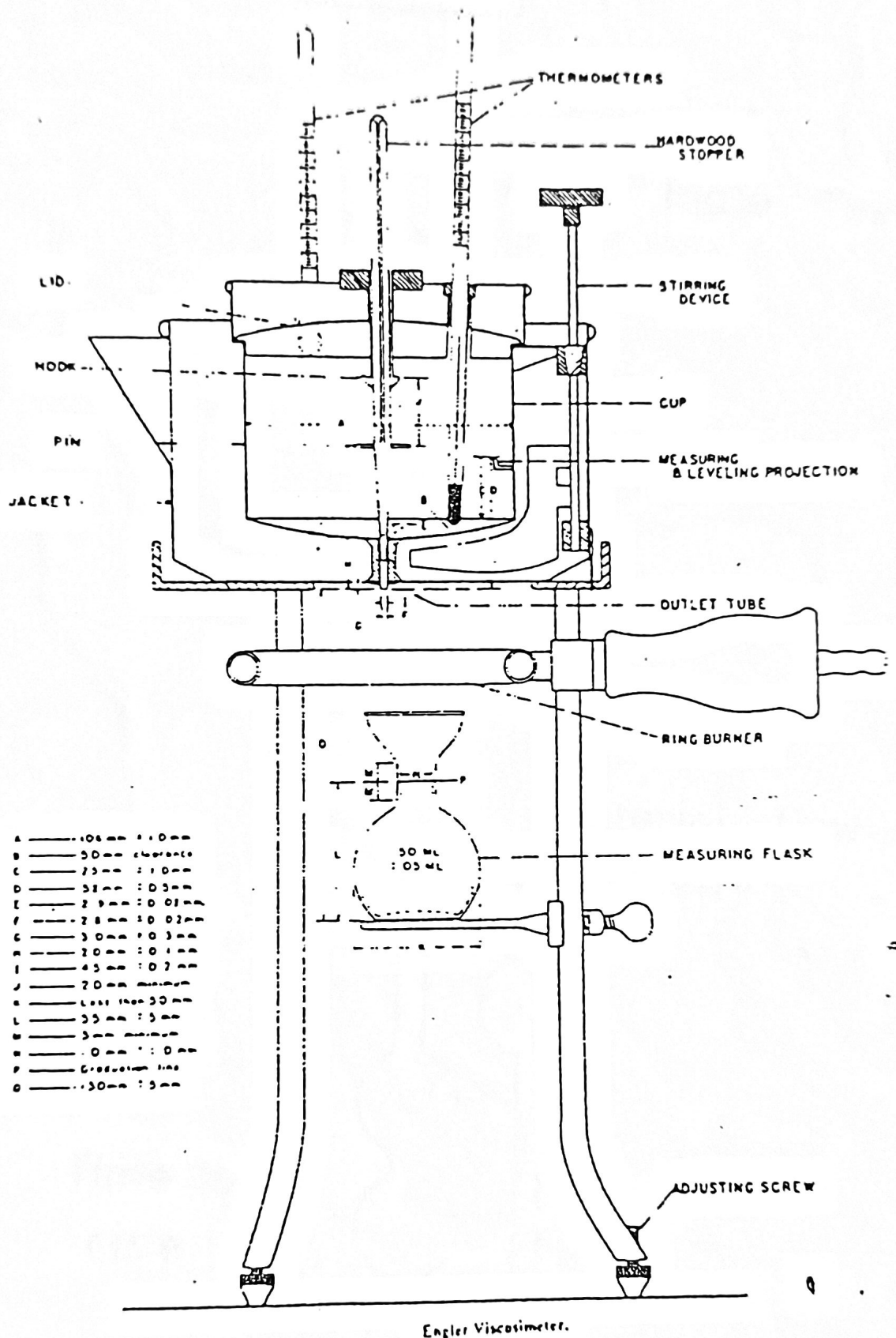


Engler Viscosimeter.

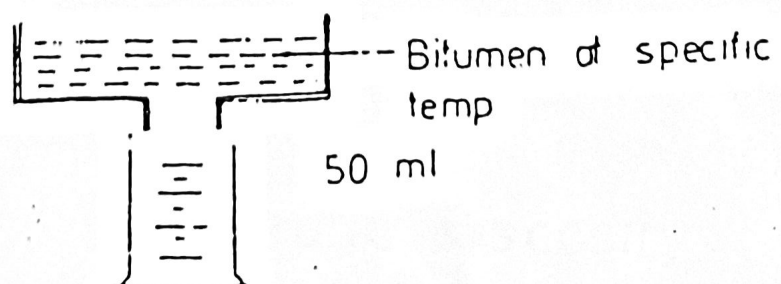

- 02 -

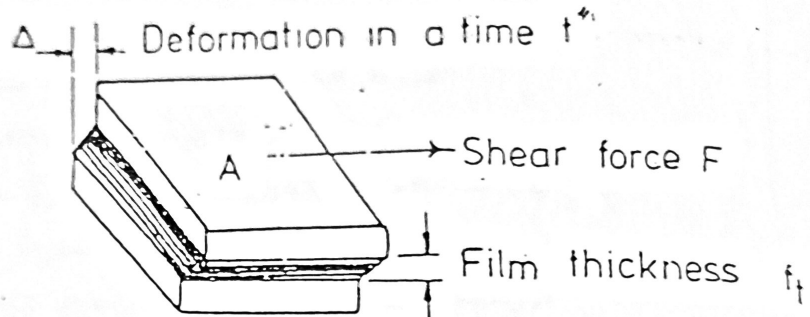

Sliding Plate Test.

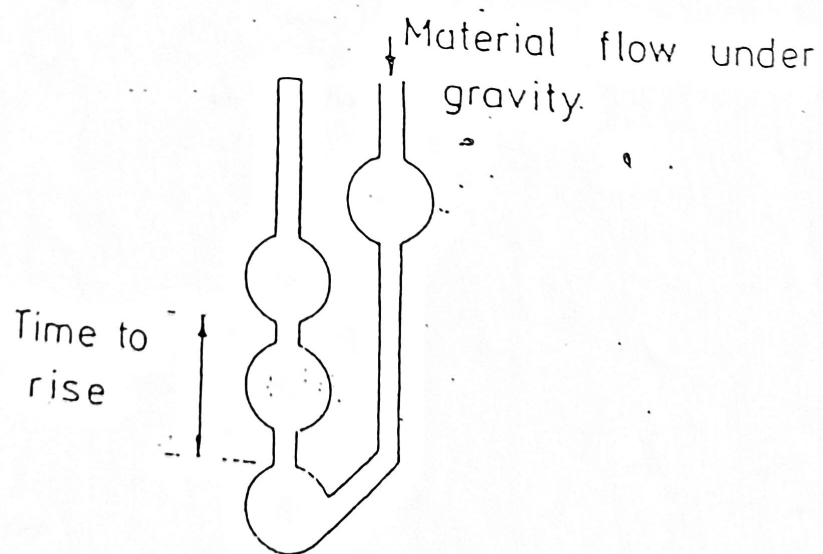

Kinematic viscosity

اللزوجة الكينماتيكية

Kinematic Viscosity (K.V)

اللزوجة الكينماتيكية هي : وحدة عملية لقياس اللزوجة للاسفلت السيلول .
ومن الاجهزة التي تقيس اللزوجة الكينماتيكية Kinematic Glass Viscometer
وفي هذا الاختبار الذي يقيس الوقت اللازم لتدفق الاسفلت المخلول بين نقطتين معينين
في انبوبة معايرة بانسياب المادة المراد اختبارها تحت تأثير الجاذبية . وتحت
ظروف محددة من درجة الحرارة وبارتفاع مقوط معروف .

الفترة الزمنية بين النقطتين المعروفتين وضربة في معامل معايرة الانبوبة
يعطي قيمة اللزوجة الكينماتيكية مباشرة بوحدة المنتمتر المربع / الثانية (مـ)

$$K.V = K_c T$$

where :-

$$K.V = \nu = \text{Kinematic viscosity in stokes}$$

$$K_c = \text{constant of the viscometer in stokes}$$

$$T = \text{Interval time in seconds .}$$

Also,

$$\text{Kinematic viscosity} = \frac{\text{Absolute viscosity}}{\text{Density}}$$

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

$$= \frac{M L^{-1} T^{-1}}{L^{-3} M} \times \frac{L^3}{M}$$

لمعرفة وحدات (ν) :-



$$\therefore F = \frac{M L}{T^2}$$

$$\therefore \nu = \frac{M L}{T^2} \div \frac{M}{L^3} = \frac{T^2}{L^2} \times \frac{L^3}{M}$$

$$= \frac{L^2}{T^2}$$

$$= \frac{cm^2}{sec} = \text{stoke بنوك}$$

$$= 100 \text{ centi stoke}$$

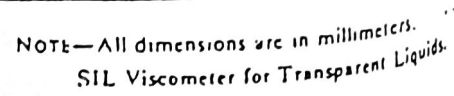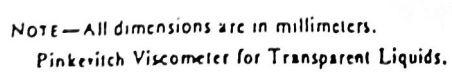

تحربة اللزوجة المطلقة (الديناميكية)

Absolute (dynamic) viscosity using sliding plate method

تتعمل هذه التجربة للمواد السيّومية الطلبة ويجرى هذا الاختبار على شريحة رقيقة من العادة السيّومية محصورة بين لوحين مساحة كل منهما (A) وسماكة الشريحة المراد اختبارها (ft) (Film thickness)

اللوح السفلي ثابت بينما يتم دفع اللوح العلوي بقوة قص (F) (Shearing Force)

التشكل الحادث بالعينة المراد اختبارها نتيجة قوة القص (Δ)

(Shear deformation) وقد حدث هذا التشكل خلال فترة زمنية قدرها (t)

اجهاد القص shear stress $\tau = \frac{F}{A}$

انفعال القص shear strain $\frac{\Delta}{ft}$

معدل انفعال القص Rate of shear strain $\gamma = \frac{\Delta}{ft} / t$

اللزوجة المطلقة Absolute viscosity = $\frac{\text{shear stress}}{\text{Rate of shear strain}}$
 $\mu = \frac{\tau}{\gamma}$


= $\frac{\text{dyne / cm}^2}{\text{cm / cm / sec}}$

= $\frac{\text{dyne} \cdot \text{sec}}{\text{cm}^2} = \frac{F \cdot T}{L^2}$


= poise براز

= 100 centipoise


ويجب ملاحظة ان معدل القص ودرجة الحرارة واجهاد القص يجب ان يكونوا ثابتين
 اثناء اجراء الاختبار كما ان هذا الاختبار لا يمكن اجراؤه على الاسفلت المطول .

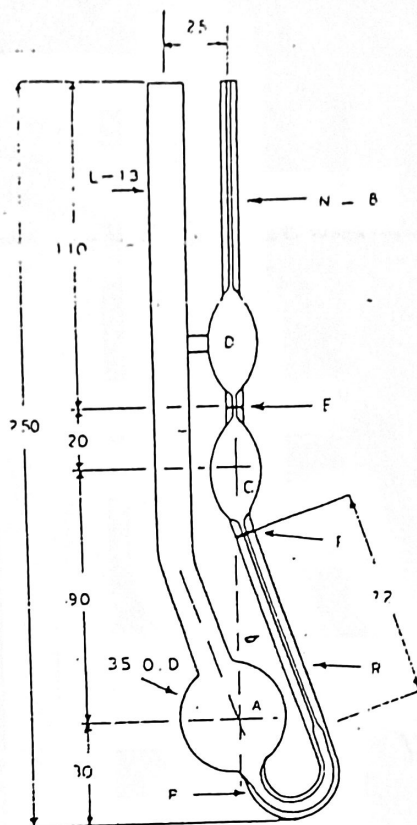

NOTE—All dimensions are in millimeters.
Cannon-Ubbelohde Routine Viscometer for Transparent Liquids.

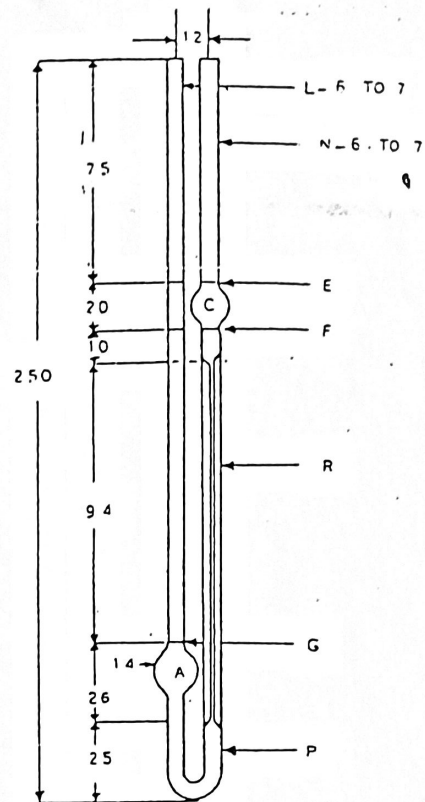

NOTE—All dimensions are in millimeters.
BS/U/M Miniature Viscometer for Transparent Liquids.

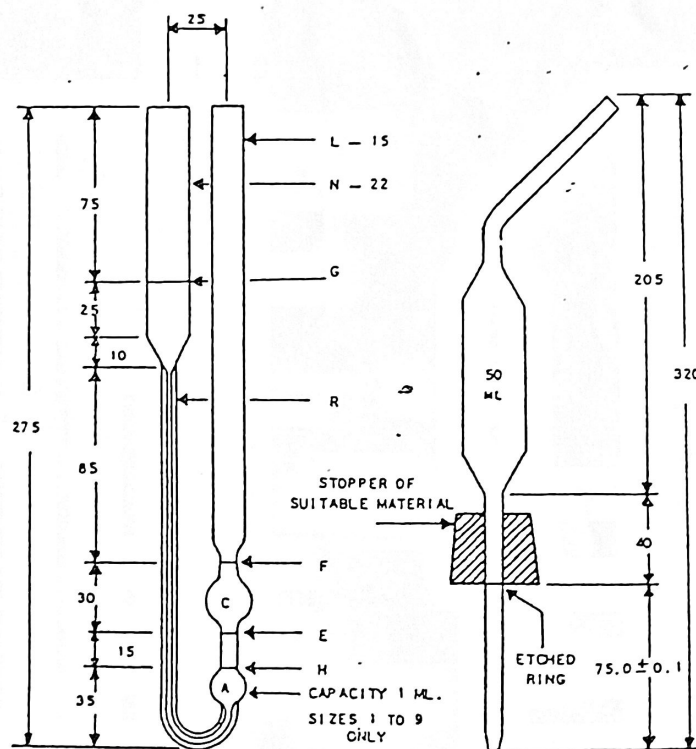

SPECIAL PIPET

NOTE—All dimensions are in millimeters.
BS/IP/RF U-Tube Reverse Flow Viscometer for Opaque Liquids.